


GIO-360

innoGIO

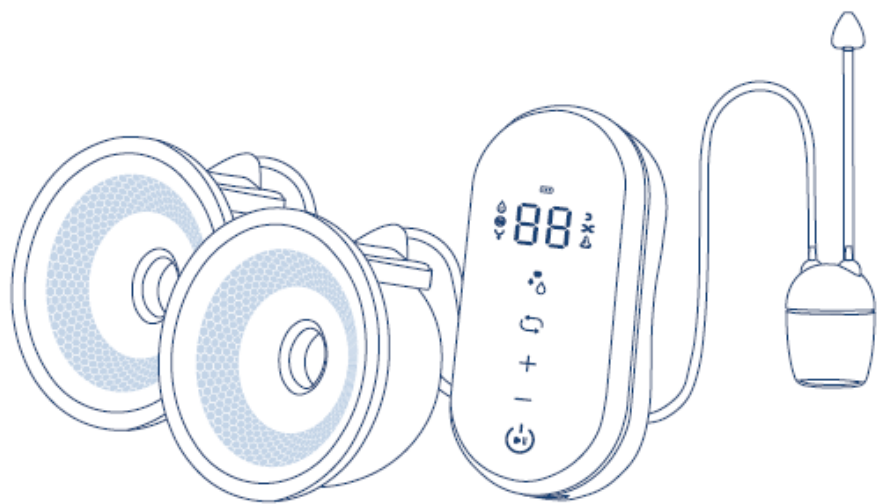

GIOmum Line Soft

Double electric breast pump
with nasal aspirator

INSTRUCTION MANUAL

Dříve než výrobek zaženete používat, pozorně si přečtete návod. Návod si ponechejte pro budoucí potřebu.

Úvod

Pro zdraví Vašeho miminka je nejlepší každodenní krmení mateřským mlékem. Ne vždy je, ale možné, aby matka nakrmila dítě přímo, jako možnost nabízíme dvojí odsávačku s nosním aspirátorem GIOmum Line Soft GIO-360.


GIOmum Line Soft – dvojitá elektrická odsávačka s nosním aspirátorem imituje sání miminka, může pomoci se stimulací většího objemu mléka, odstraní nepohodlí (vzniklé plnými prsy). Odsajte mléko k zamražení a podávejte miminku mateřské mléko, když je matka mimo domov či v práci. Umožňuje nosní odsávání, v době, kdy je dítě nemocné.

Funkce


- Dvojitá odsávačka zvyšuje efektivitu a redukuje čas odsávání.
- Trychtýř pro použití bez držení, lze vložit do podprsenky.
- Možnost jednoho či dvojitého odsávání. Intuitivní a jednoduché symboly.
- 2 v 1: odsávačka mléka s funkcí nosní odsávačky, jednoduchá na sestavení a k čištění.
- Měkký silikonový nosní aspirátor, pohodlný pro dítě.
- Kontrolky LED s dotykovými tlačítky.
- Silné a plynulé sání se 3 režimy: Masážní režim/ Stimulační režim/ Odsávací režim (9 úrovní)
- Nabíjecí baterie s kapacitou až 2200mAh.
- Pojistka proti zpětnému toku s jednosměrným ventilem.

3 režimy

Masážní režim


Všechny úrovně masážního režimu pracují v pravidelném a uměřeném rytmu se silným sáním, za účelem stimulace mléka. Masážní režim má 9 úrovní. Úrovní změňte stisknutím tlačítka 

Odsávací režim


Všechny úrovně odsávacího režimu pracují v pravidelném a uměřeném rytmu se silným sáním, za účelem odsátí mléka. Odsávací režim má 9 úrovní. Úrovní změňte stisknutím tlačítka 

Stimulační režim

Stimulační režim má také 9 úrovní. Každá úroveň střídá 3 masáže a 1 odsávání. Pomáhá tím k stimulaci mléka.

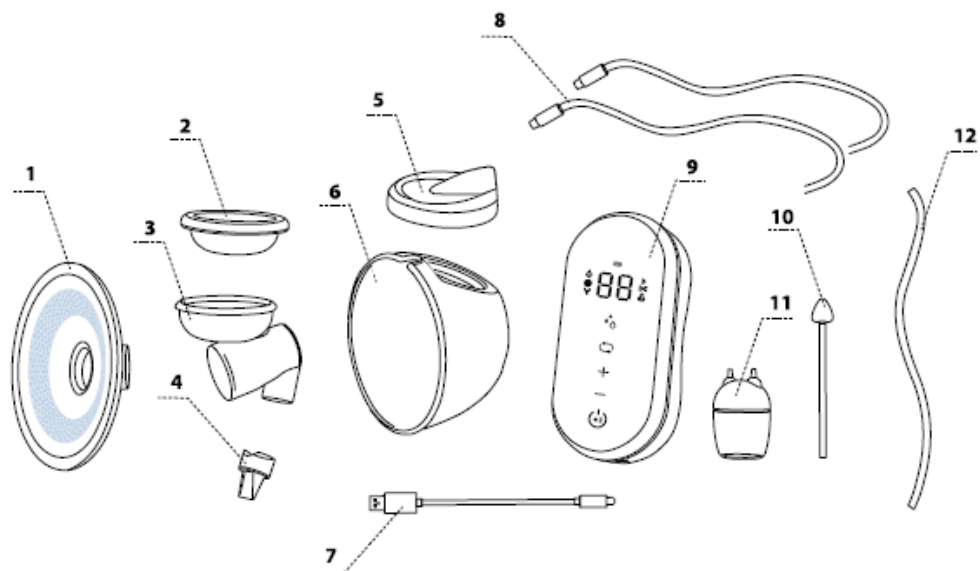

Č.	NÁZEV	KS	MATERIÁL	TEPLOTNÍ REZISTENCE
1	Prsní košík 24 mm	2	silikon	180 °C
2	Silikonová membrána	2	silikon	180 °C
3	Hlavice	2	polypropylen (PP)	120 °C
4	Ventil	2	silikon	180 °C
5	Vrchní kryt	2	polypropylen (PP)	120 °C
6	Sběrač Mléka	2	polypropylen (PP)	120 °C
7	USB kabel	1	XX	XX
8	Trubičky	2	Polyvinylchlorid (PVC)	120 °C
9	Základna (motor)	1	XX	XX
10	Nástavec nosní odsávačky	1	silikon	180 °C
11	Sběrač hlenů	1	polypropylen (PP)	120 °C
12	Nosní trubička	1	Polyvinylchlorid (PVC)	120 °C

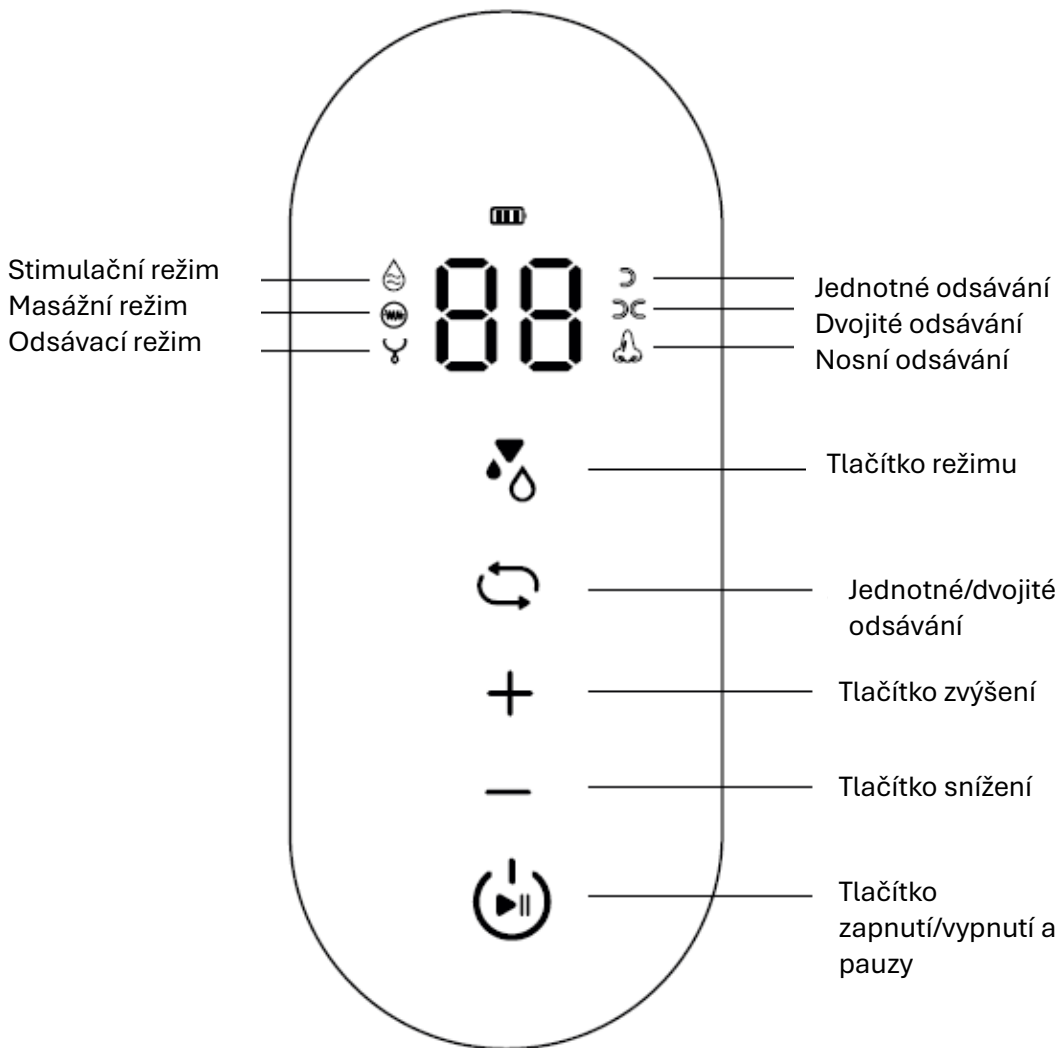

Specifikace

- Napájení: 100 - 240V – 50/60Hz s adaptérem DC 5V – 1A (není součástí balení)
- Výkon: 5W, kapacita baterie: 2200 mAh
- Max. sání: 315 mmHg +/- 7,5 mmHg
- Celková váha: 0,63 kg
- Skladujte při teplotě: 5° až 40° a vlhkosti 10% - 90% RH
- Atmosférický tlak: 850 Hpa – 1060 Hpa




Sestavení odsávačky



1 Umístěte silikonovou membránu (2) do hlavičky (3) odsávačky a přitlačte ji, aby okraje pevně přilnuly a zajistily dokonalé přilnutí.

2 Naistalujte ventil (4) do spodní části hlavičky (3).



3 Vložte hlavičku (3) do sběrače mléka (6). Hlavičku přitlačte, aby byla řádně vsazena.

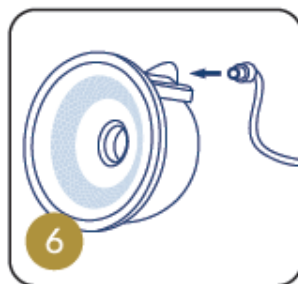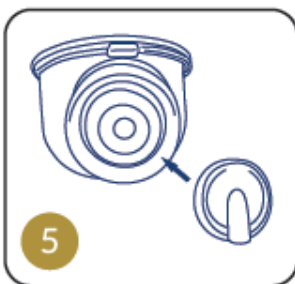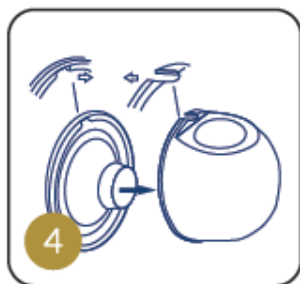

4 Na sběrač mléka (6) nasadte prsní košík (1). Drážku na košíku srovnajte s drážkou na základně odsávačky.

5 Nasadte vrchní kryt (5) na sběrač mléka (6).



6 Spojte jeden konec trubičky (8) s vrchním krytem (5) prvního sběrače mléka.

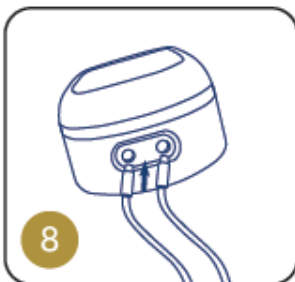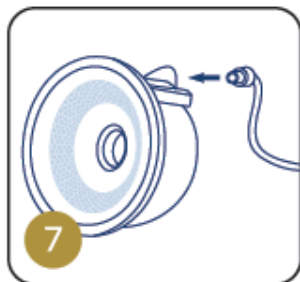

7 Spojte jeden konec druhé trubičky (8) s vrchním krytem (5) druhého sběrače mléka.

8 Spojte zbylé dva konce trubiček (8) s dírkami na základně (motoru) (9).

9 Použijte USB kabel (7) k nabití motoru (9) před a po každém použití.

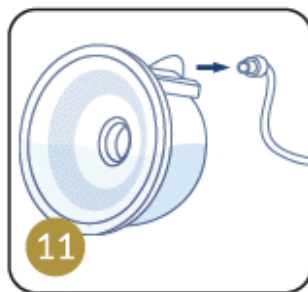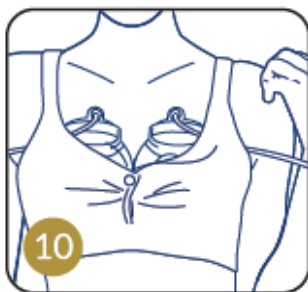

10 Vložte prsní košíčky do podprsenky a jistě se, že je pevně přitisknut k hrudi, a že trubičky nejsou nikde blokovány.

11 Po ukončení procesu odsávání sundejte trubičky (8).

12 slejte mléko ze sběrače (6) do lahvičky.

Pozn.

Pro jednotné odsávání připojte k levé dírce. Jedná se o přednastavenou pozici k jednotnému odsávání, pravá dírka k tomu nemůže být použita.


Symbyly jsou znázorněny u odpovídajících dírek.



Jak odsávat



Ujistěte se, že je prsní košík pevně přitisknut k prsu.

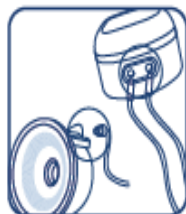

Ujistěte se, že jsou trubičky pevně nasazeny






Ujistěte se, že je silikonová membrána těsně nasazena a hlavici.



Ujistěte se, že je ventil nastaven ve správné pozici.

Důležitá poznámka

Postupujte dle instrukcí níže, abyste se vyvarovali úniku mléka.

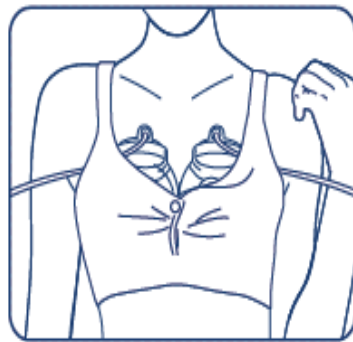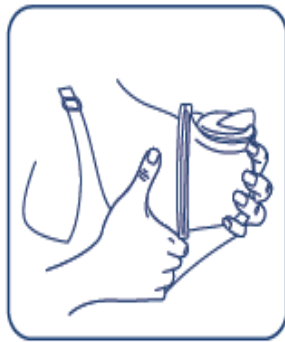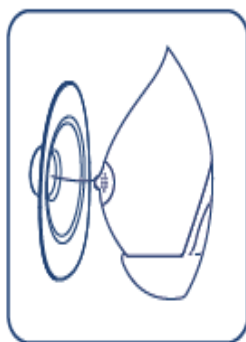

Správné pozice bradavky v prsním košíku je klíčem k pohodlnému odsávání.

Odsávejte v těchto pozicích

Nejlepší pozice k odsávání je vzpřímená pozice s lehkým náklonem vpřed. Ve stoje či v sedu se lehce předkloňte. Tato pozice je pro matku pohodlnější. Odsávání v lehu způsobí špatnou pozici sběrače, čímž dojde ke zpětnému odtoku mléka. Níže znázorňujeme pozice k odsávání.



Vzpřímená pozice v sedu bez náklonu je také přijatelná, pokud to Vaše situace jinak neumožňuje.



Pozice v záklonu nezajistí dobré odsávání a umožní únik mléka, z tohoto důvodu se nedoporučuje.



Nejlepší pozice k odsávání je vzpřímená pozice v sedu s lehkým náklonem vpřed
















Odsávání není možné provádět v leže.


Návod k použití

1. Sterilizujte části, které se dostanou do kontaktu s mlékem.
2. Umyjte si ruce, poté sestavte odsávačku, dle předcházejícího návodu.
3. Posadte se do pohodlné pozice a lehce se předkloňte.
4. Lehce promasírujte své prso či na něj přiložte teplý ručník.
5. Pevně přitiskněte prsní košík k prsu, ujistěte se, že je bradavka uprostřed.

Návod k odsávání

1. Režim masáže/stimulace/odsávání

- Stiskněte tlačítko  po dobu 2 vteřin, rozsvítí se LED displej a odsávačka se zapne v jednotném režimu  s odsávací úrovní z předešlého použití. Led displej ukazuje ,00' a začne s odpočítáváním uběhlého času. Stiskněte tlačítko  pro změnu na dvojitě odsávání .
- Stiskněte tlačítko funkce  pro přepnutí na stimulační režim s odsávací úrovní z předešlého použití režimu stisknutím . Použijte tlačítka **+** a **-** ke změně úrovně, stimulační režim má 9 úrovní. Stiskněte tlačítko  k pozastavení odsávačky.
- Stiskněte tlačítko funkce  pro přepnutí na masážní režim s odsávací úrovní z předešlého použití režimu stisknutím . Použijte tlačítka **+** a **-** ke změně úrovně, stimulační režim má 9 úrovní. Stiskněte tlačítko  k pozastavení odsávačky.
- Stiskněte tlačítko funkce  pro přepnutí na odsávací režim s odsávací úrovní z předešlého použití režimu stisknutím . Použijte tlačítka **+** a **-** ke změně úrovně, stimulační režim má 9 úrovní. Stiskněte tlačítko  k pozastavení odsávačky.

2. Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách používání.
3. Stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko  pro vypnutí odsávačky.



Upozornění

1. Sterilizujte oddělené části před a po každém použití.
2. Seznamte se s funkcemi odsávačky před jejím použitím. Přiložením odsávačky k dlani či paži, můžete vyzkoušet funkce odsávačky.
3. Ujistěte se, že jsou všechny části bez prasklin či jiného kazu. Věnujte pozornost obzvláště pozici ventilu, ta totiž ovlivňuje sací efekt odsávačky.
4. Kontaktujte svého lékaře či laktačního specialistu, pokud je odsávání bolestivé, či při něm dojde k odsátí žádného nebo malého množství mléka.
5. Nejedná se o hračku, udržujte mimo dosah dětí.
6. **NEODKLÁDEJTE** produkt v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, slunečné parapety a jiné.

Rady

- Pokud mléko není odsáváno, uvolněte se a upravte pozici prsního koše na prstu, poté pokračujte v odsávání.
- Nepokračujte v odsávání, pokud ani po 5 minutách mléko neteče. Zkus odsávat jindy.
- Konzultujte laktačního specialistu, pokud během odsávání pociťujete nepohodlí či bolest.
- Odsávání je efektivnější, pokud ho provádíte pravidelně (každé 2–3 hodiny).
- Pokud je to možné, používejte AC adaptér namísto baterie, k dosažení lepších výsledků.



Návod k nosní odsávače

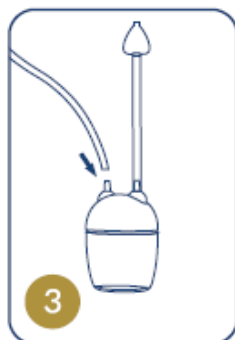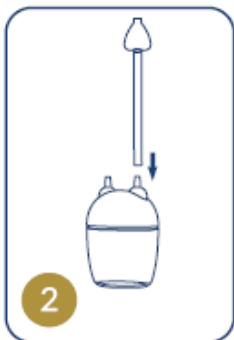

1 Sestavte sběrač hlenů (11), nasazením vrchní části na kelímek.

2 Nasadte nástavec (10) na první díрку sběrače (11).

3 Nasadte nosní trubičku (12) na druhou díрку sběrače (11).

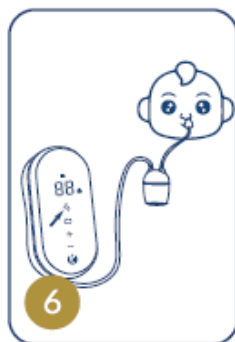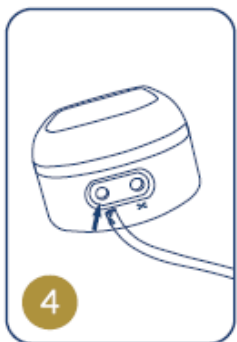




4 Připojte druhý konec nosní trubičky (12) s levou dírkou na základně (motoru) (9).

5 Vložte druhý konec nosního nástavce (10) do nosu vašeho dítěte.

6 Stiskněte tlačítko , poté tlačítko  ke zvolení funkce .

Návod k nosní odsávače

1. Ujistěte se, že jsou části – nosní trubička, nosní nástavec a sběrač hlenů sterilizovány před a po použití.
2. Ujistěte se, že jsou spoje řádně utěsněny, aby bylo odsávání, co nejefektivnější.
3. Levá dírka motoru je určena k odsávání nosu, pravá nemůže být použita.
4. Stiskněte tlačítko funkce  pro přepnutí na odsávací režim . Použijte

tlačítka **+** a **-** ke změně úrovně, nosní režim má 9 úrovní. Stiskněte tlačítko  k pozastavení odsávačky.

Čištění odsávačky

Rozložte odsávačku a všechny části vyčistěte teplou mýdlovou vodou.

Doporučujeme sterilizovat části vložním do vařící vody po dobu 2–3 minut, nebo použitím parního sterilizátoru/ UV sterilizátoru/ mikrovlnné trouby. Poté všechny části usušte a skladujte na suchém a chladném místě.



!!! Plast může být poškozen či zdeformován, pokud je dlouhodobě vystaven vysokým teplotám.

Napájení

Složte kabel a adaptér, poté vložte do zásuvky.!!! Používejte pouze původní AC adaptér. Jiné by mohly způsobit poškození jednotky.

LITHIUM-IONTOVÁ baterie

Model má vestavěnou opakovaně nabíjecí baterii, což umožňuje snadnější přenos, jelikož můžete odsávačku nabít, kdykoliv je potřeba. Baterie musí být plně nabitá před prvním použitím. Nenabíjejte baterii zbytečně dlouho. Když zabliká symbol baterie, značí to nízkou kapacitu, dobijte poté baterii.

Pozn.

Pokud motor pracuje bez zapojení do sítě, stav baterie je ukázán.

Pokud není baterie dlouhodobě používána, baterie se vybije.

Pokud se baterie vybije zapijte zařízení do sítě. Vyčkejte cca 10 minut, než se rozsvítí displej. Pokud se baterie nezačne do půlhodiny nabíjet kontaktujte zákaznický servis InnoGIO.

Tento produkt lze nabít pomocí USB adaptéru, počítačem či power bankou. Zjednodušuje to používání mimo domov.

Ukládání mateřského mléka

Čerstvé mléko lze skladovat v datem označených, čistých a uzavřených nádobách. Lze použít lahvičky či sáčky na mléko.

Skladování mateřského mléka

	MRAZÁK -18 °C	LEDNICE -4 °C	LEDOVÝ OBKLAD -15 °C	POKOJOVÁ TEPLOTA 22–26 °C
ČERSTVÉ	3 měsíce	1 den	8 hodin	3–4 hodiny
ROZMRAŽENÉ V LEDNICI	opětovně nezamrazujte	1 den	neskladujte	3–4 hodiny
ROZMRAŽENÉ VE VALŽNÉ VODĚ	opětovně nezamrazujte	1 den	neskladujte	podávejte dítěti, co nejdříve

Pozn.

- Neskladujte mléko v teplém počasí.
- K rozmrazování nepoužívejte vodu s vyšší teplotou než 60 °C.
- Nevkládejte mateřské mléko do mikrovlnné trouby.
- Nepřimíchejte čerstvé mléko k zamraženému.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje motor	Sít	Zkontrolujte, že AC adaptér řádně připojen do sítě. Zkontrolujte síť. Kontaktujte distributora, pokud odsávačka nefunguje, i když je připojena k síti.
	Baterie	Pokud bliká symbol baterie, nabijte ji.
Slabé či žádné sání	Špatné sestavení	Zkontrolujte, že nechybí žádná součástka. Ujistěte se, že je silikonová membrána těsně naistalována. Pevně odsávačku přitiskněte k prsu. Zkontrolujte pozice všech silikonových částí.
	Poškozené části	Zkontrolujte, že žádná část není poškozena, pravidelně kontrolujte silikonový ventil. Pro náhradní díly kontaktujte InnoGIO.
	Unikání vzduchu u prsa	Pevně prsní košík přitiskněte k prsu. Upravte pozici odsávačky.
Nepohodlí či bolest	Upravte úroveň odsávání. Změňte pozic prsního košíku na prsu. Pokud bolest přetrvává konzultujte s lékařem či laktačním specialistou.	

Toto zařízení by nemělo být vyhozeno do směsného odpadu, ale zrecyklováno, v recyklačním středisku pro domácí elektrické spotřebiče.



innogIO

Manufactured in China for **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com

 @innogIO.official

 @innogio_com