


LANSINOH HANDSFREE ODSÁVAČKA Mlieka


SK: Návod na použitie

Obsah balenia:

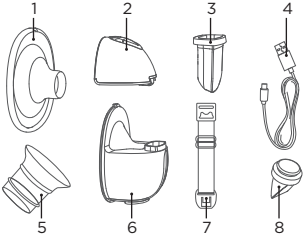

- 1. Prsný košík (nadstavec) (24mm)
- 2. Motor odsávačky
- 3. Silikónová membrána
- 4. USB nabíjací kábel
- 5. Silikonová vložka (21mm)
- 6. Zberná nádoba na mlieko
- 7. Nastavovacia spona do podprsenky
- 8. Ventil

LED Displej & vlastnosti

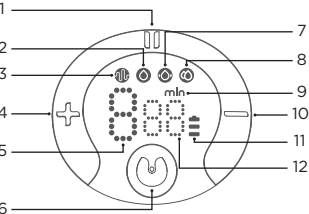

- 1. Tlačidlo pauza/štart
- 2. Režim odsávania
- 3. Režim stimulácie
- 4. Tlačidlo pre zvýšenie sily satia
- 5. Displej na zobrazenie sily satia
- 6. Tlačidlo na zapínanie/na výber režimu
- 7. Režim masírovania
- 8. Automatický režim
- 9. Čas/minúta
- 10. Tlačidlo pre zníženie sily satia
- 11. Stav batérie
- 12. Displej zobrazujúci čas

Pred prvým použitím


- Pred prvým použitím rozložte odsávačku, vyčistite a vydezinfikujte zbernú nádobku na mlieko, prsný košík, ventil, silikónovú membránu a v prípade potreby silikónovú vložku. NEUMÝVAJTE motor odsávačky. Odsávačku udržiavajte v suchu a nikdy ju neoplachujte ani neponárajte do vody.
- Utrite motor odsávačky, klávesnicu a povrch odsávačky dezinfekčným prostriedkom s nízkou hladinou, ako je etyl alebo izopropylalkohol (70 - 90 %).
 - Demontujte časti zberača mlieka a všetky časti vložte do veľkého hrnca.
 - Časti prikryte vodou a uistite sa, že je v hrnci priestor na ponorenie všetkých častí do vody.
 - Privedte vodu do varu a nechajte časti variť 5 minút. Po uvarení vyberte časti z hrnca pomocou klieští a položte na čistú utierku, aby ste ich vysušili, pričom všetky časti prikryte druhou utierkou.
 - Pred montážou a použitím nechajte diely úplne vyschnúť. Čiastočne vysušené diely môžu ovplyvniť činnosť odsávačky alebo spôsobiť poškodenie komponentov.

Zostavenie odsávačky


Pred manipuláciou s odsávačkou si vždy dôkladne umyte a osušte ruky mydlom a vodou. Uistite sa, že postupujete podľa krokov a odsávačku správne zostavíte podľa pokynov.

Upozornenie: Vizualne skontrolujte jednotlivé komponenty, či nie sú prasknuté, odštiepené, natrhnuté, nemajú zmenenú farbu alebo nie sú poškodené. Tieto môžu ovplyvniť funkčnosť odsávačky.


- 1. Vložte ventil do zbernej nádoby na mlieko, dávajte pozor na smer skladania.

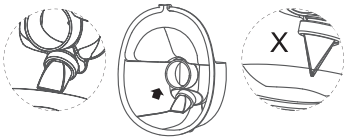


- 2. Silikónovú membránu vložte do misky zbernej nádoby mlieka a zatlačte ju rukami, aby sa okraje pevne spojili, aby sa zaistilo dokonalé utesnenie.

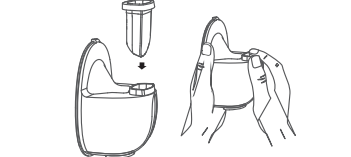

- 3. Vložte prsný košík na nádobu na zber mlieka, uistite sa, že ste zarovnali drážku prsného košíka so zodpovedajúcou drážkou na nádobe na zachytávanie mlieka, a potom zatlačte okraje oboma rukami, aby ste zaistili tesnenie na jeho miesto.

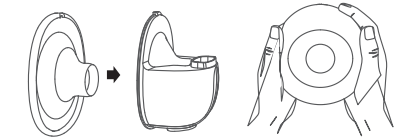


- 4. Nasadte motor odsávačky, zarovnajete zárez pod motorom odsávačky so silikónovou membránou a založte ho smerom nadol, aby zapasoval so zbernou nádobou na mlieko pre zabezpečenie úplného utesnenia.

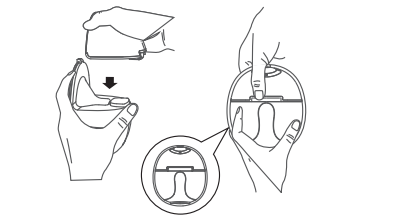

Začiatok odsávania

Pred prvým použitím Handsfree odsávačky Lansinoh® sa uistite, že je odsávačka plne nabitá. Podrobnosti nájdete v časti Indikátory stavu batérie.

- 1. Pred manipuláciou s odsávačkou si vždy dôkladne umyte a osušte ruky mydlom a vodou.
- 2. Pevne pritlačte prsný košík k prsiam, uistite sa, že nie sú žiadne medzery a že vaša bradavka je vycentrovaná. Udržujte odsávačku vo zvislej polohe. Dávajte pozor, aby ste nemenili polohu odsávačky alebo prsníkov, pretože to ovplyvní sanie odsávačky.

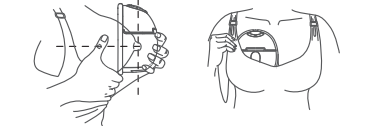

- 3. Stlačte a podržte tlačidlo zapínania kým sa odsávačka nezapne.

- 4. Krátko stlačte tlačidlo [Pauza/Štart] ktorým kontrolujete štart a pauzu odsávačky. Krátko stlačte tlačidlo [Režim] ktorým prepínate režim po zapnutí odsávačky. Môžete si vybrať zo 4 režimov: režim stimulácie, odsávania, režim masáže, automatický režim.

Upozornenie: Odsávačka počas nabíjania nefunguje.

Poloha pri odsávaní

Uvoľnite sa a sadnite si do pohodlnej stoličky/kresla. Mierne sa nahnite dopredu (použite vankúš na podporu chrbtá). Dbajte na udržiavanie odsávačky vo vzpriamenej polohe.



Indikátor stavu batérie

STAV BATÉRIE ZOBRAZENÝ AKO	ZOSTÁVAJÚCI PREVÁDZKOVÝ ČAS
3 paličky	Cca 100 minút
2 paličky	cca 70 minút
1 palička	cca 30 minút
1 blikajúca palička	cca 10 minút


Ukončenie odsávania & prelievanie mlieka

Po dokončení odsávania odsávačku opatrne zložte z prsníka. Udržujte odsávačku vo zvislej polohe, potom odpojte motor odsávačky a podržte časti zberača mlieka, aby ste naliali mlieko do sáčkov/fľaš.


- 1. Po dokončení odsávania vypnite odsávačku stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vyp. Prstom narušte tesnenie medzi prsníkom a prsným košíkom a potom opatrne zložte odsávačku z prsníka.



- 2. Odeľte motor odsávačky od zbernej časti. Jednotlivé časti vyčistite podľa pokynov.

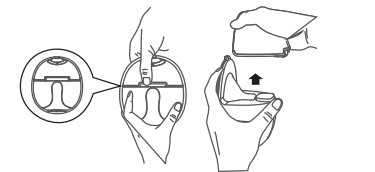

- 3. Ak chcete preliať materské mlieko do fľaše alebo sáčkov na skladovanie mlieka, opatrne nalejte materské mlieko do zvolenej skladovacej nádoby a uistite sa, že nalievacia štrbina je zarovnaná s otvorom.

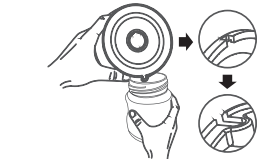

Pokyny ku skladovaniu mlieka

Informujte sa u svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo u certifikovaných laktačných poradkýň ohľadne skladovania mlieka. Pri mrazení skladujte v zadnej časti mrazničky a neskladujte mlieko v dvierkach, pretože teplota môže pri otváraní a zatváraní dvierok kolísat. Každé odsaté mlieko označte dátumom a použite najskôr najstaršie materské mlieko.

Poznámka: NEMRAZTE mlieko, ktoré ste už raz zamrazili.

Rozmrazovanie

Zmrazené mlieko rozmrazte v chladničke alebo nádoby umiestnite pod tečúcu vlažnú vodu, pričom vodu postupne ohrievajte, kým sa mlieko neroztopí. Rozmrazené mlieko možno uchovávať v chladničke až 24 hodín. Materské mlieko nie je homogenizované a môžete si všimnúť, že sa oddeľuje, keď stojí. Rozmrazené mlieko pred kŕmením dieťaťa jemne premiešajte, aby sa premiešali vrstvy, ktoré sa oddelili. Materské mlieko sa môže líšiť farbou a konzistenciou v závislosti od času, kedy bolo mlieko odsaté, od toho, čo ste jedli, a od veku dieťaťa v čase odsávania.

Poznámka: Materské mlieko NIKDY nezohrievajte v mikrovlnke! Mení sa tým jeho zloženie. Zohrievanie v mikrovlnke tiež vytvára horúce miesta, ktoré môžu dieťa popáliť.

Poznámka: Materské mlieko nezohrievajte vo vriacej vode

1. Napájanie

Prevádzka batérie: Dobiacia Li-Ion batéria
Prevádzková doba: Približne 100 minút, v závislosti od čerstvosti batérie a nastavení odsávačky
Stratový výkon odsávačky: maximálne 4 watty
Regulácia napätia: Lineárny regulátor napätia s nízkym výpadkom napätia a ochranou proti skratu


2. Riadiaci systém

Riadiaca jednotka: Mikrokontrolér s integrovanou programovou pamäťou.
Programová pamäť: 8K flash pamäť (ROM), 1K pamäť (RAM)
Rozhranie human-machine: LED displej, softvérové tlačidlá
Voliteľný režim štýlu odsávania: 4 režimy štýlu odsávania sú voľiteľné a ovládané tlačidlami
Nastaviteľná úroveň sania: 9 úrovní sania je voľiteľných a ovládateľných z gombíkov
Úroveň sacieho vákua (odsávanie): minimálne 120 mmHg, maximálne 280 mmHg

Záruka


Naša záruka sa vzťahuje na všetky poruchy, ktoré ovplyvnia výkon odsávacieho mechanizmu na 2 roky a na ostatné súčasti produktu našej odsávačky na 90 dní. Táto záruka sa nevzťahuje na kozmetické, náhodné poškodenie, nesprávne používanie, nesprávne použitie napätia, každodenné nosenie a roztrhnutia, poruchy alebo poškodenia, ktoré sú výsledkom nesprávneho používania odsávačky a na odsávačky, ktoré boli upravené alebo používané viacerými osobami. Zo zdravotných a hygienických dôvodov by sa naše odsávačky nemali ďalej predávať a naša záruka sa nevzťahuje na žiadnych ďalších majiteľov. V prípade poruchy odsávačky materského mlieka, na ktorú sa vzťahuje naša záruka, odsávačku mlieka alebo dotknuté časti opravíme alebo vymeníme. To môže znamenať, že poskytujeme jeden alebo viac náhradných dielov. Môžeme vás požiadať o vrátenie čerpadla a/alebo chybných komponentov na účely testovania alebo opravy. Ak chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, mali by ste nám oznámiť chybu tak, že nás budete kontaktovať na info@lansinoh.sk. Budete nám musieť poskytnúť dôkaz nákupu odsávačky mlieka alebo jej častí. Následne vás budeme informovať o ďalšom postupe. VAŠE ZÁKONNÉ PRAVA NIE SÚ DOTKNUTÉ. Pre viac informácií o vašich právach kontaktujte miestne spotrebiteľské poradenské centrum alebo prejdite online. Túto záruku poskytuje Lansinoh Laboratories Inc, Ground Floor, West MayesbrookDom, Lawnswood Business Park, Leeds, LS16 6QY.

Obsah balení

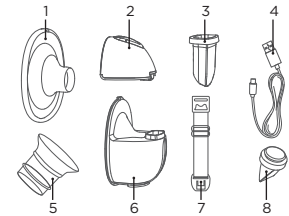

1. Prsní košík (24 mm)
2. Motor odsávačky
3. Silikonová membrána
4. USB nabíjecí kabel
5. Silikonová vložka (21 mm)
6. Sběrná nádoba na mléko
7. Nastavitelná přezka na podprsenku
8. Ventil

LED obrazovka a funkce

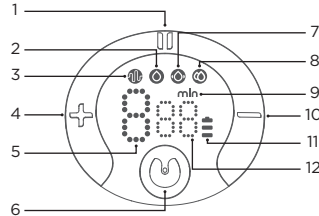

1. Tlačítko Pauza/Start
2. Mód odsávání
3. Mód stimulace
4. Tlačítko zvýšení úrovně sání
5. Zobrazení úrovně sání
6. Tlačítko napájení/výběru režimu (módu)
7. Mód stimulace
8. Automatický mód
9. Čas/minuta
10. Tlačítko snížení úrovně sání
11. Ukazatel napájení
12. Ukazatel času

Před prvním použitím


- Rozložte odsávačku, vyčistěte a vydesinfikujte sběrnou nádobu na mléko, prsní košík, ventil, silikonovou membránu a silikonovou vložku před prvním použitím. Nemýjte motor odsávačky. Měl by zůstat suchý a nikdy by neměl být oplachován či ponořen do vody.
- Otřete motor odsávačky, ovládací panel a povrch odsávačky dezinfekčním prostředkem, jako je etylalkohol nebo izopropylalkohol (70-90 %).
 - Rozmontujte části sběrače mléka a vložte všechny části do velkého hrnce.
 - Zalijte části vodou, tak aby byly všechny části v hrnci plně ponořeny ve vodě.
 - Přiveďte vodu k varu a nechte části vařit po dobu 5 minut. Po vaření vyjměte části z hrnce pomocí kleští a položte je na čistou utěrku, přičemž je zakryjte druhou utěrkou.
 - Nechte části úplně vyschnout před sestavením a použitím. Částečně suché části mohou ovlivnit provoz čerpadla nebo způsobit poškození komponentů.

Sestavení


Vždy si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou a osušte je před manipulací s handsfree odsávačkou. Ujistěte se, že dodržujete kroky a odsávačku správně sestavíte dle pokynů.

Upozornění: Vizually zkontrolujte jednotlivé komponenty, zda nemají praskliny, odštěpky, trhliny, změnu barvy nebo degradace. Tyto vady mohou ovlivnit funkčnost odsávačky.


1. Nainstalujte ventil do sběrné nádoby na mléko, věnujte pozornost směru instalace.

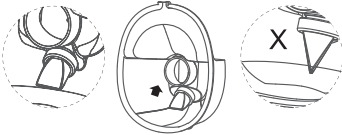


2. Vložte silikonovou membránu do sběrné nádoby na mléko a přitlačte ji rukama, aby se okraje pevně uchytily a zajistily dokonale utěsnění.

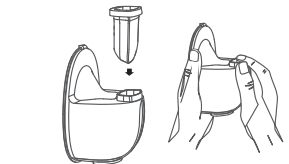

3. Nasadte prsní košík na sběrnou nádobu na mléko. Ujistěte se, že je odváděcí drážka na prsním košíku zarovnána s odpovídající drážkou na sběrné nádobě na mléko. Poté okraje stlačte oběma rukama, aby bylo zajištěno těsnění na místě.

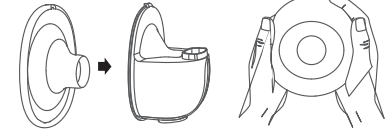


4. Nasadte motor odsávačky, zarovnejte drážku pod motorem odsávačky se silikonovou membránou a sestavte jej směrem dolů, aby se vešel do sběrné nádoby na mléko a zajistil úplné utěsnění.

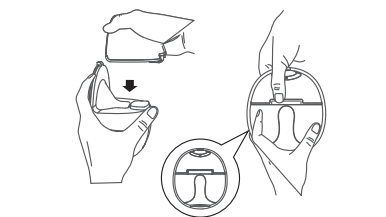


Začátek odsávání

Před prvním použitím Handsfree odsávačky Lansinoh® se prosím ujistěte, že je plně nabitá. Podívejte se na indikátor stavu baterie.

1. Vždy si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou a osušte před manipulací s odsávačkou.
2. Pevně přitlačte prsní košík k prsu a ujistěte se, že nejsou žádné mezery a že je bradavka vycentrována. Udržujte odsávačku vzpřímeně. Dbejte na to, abyste nezměnili polohu odsávačky nebo prsu, protože to ovlivní sací výkon odsávačky.

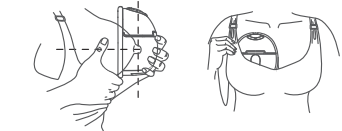

3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste spustili odsávačku mateřského mléka.

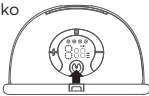

4. Rychlým stisknutím tlačítka pozastavíte odsávání mléka. Rychlým stisknutím tlačítka přepnete režimy po spuštění odsávání mléka. Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat ze 4 módů: stimulační, odsávání, masážní a automatický.

Když svítí kontrolka , je zapnutý stimulační mód.

Když svítí kontrolka , je zapnutý mód odsávání.

Když svítí kontrolka , je zapnutý masážní mód.

Když svítí kontrolka , je zapnutý automatický mód.


Poloha při odsávání

Uvolněte se a posaďte se na pohodlnou židli, mírně se předkloněte (použijte polštář na podporu zad). Ujistěte se, že je odsávačka mléka ve svislé poloze.



Nastavení délky ramínek podprsenky

Nastavte délku ramínek podprsenky pro pohodlnější odsávání. Jeden konec spony na ramínka připevněte ke vnitřní sponě kojící podprsenky. Druhý konec spony připevněte ke sponě na ramínko kojící podprsenky.

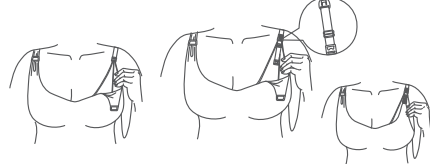

Indikátor stavu baterie

INDIKÁTORU STAVU BATERIE	ZBÝVAJÍCÍ ČAS PROVOZU
3 čárky	Cca 100 minut
2 čárky	cca 70 minut
1 čárka	cca 30 minut
1 blikající čárka	cca 10 minut

Čištění po každém použití


- NEUMÝVEJTE motor odsávačky. Otřete motor odsávačky, ovládací panel a povrch odsávačky dezinfekčním prostředkem, jako je ethylalkohol nebo isopropylalkohol (70-90 %).
- Ihned po každém použití opláchněte všechny části sbírající mléko studenou vodou.
 - Umístěte části do čistého nádobí určené pouze pro mytí dětského nádobí. Nepokládejte části přímo do dřezu, protože bakterie ve dřezu nebo odtoku by mohli části kontaminovat.
 - Vymyjte části teplou mýdlovou vodou, k vyčištění sběrače mléka můžete použít kartáček na dudlíky.
 - Opláchněte části tekoucí čistou teplou vodou nebo je ponořte do čisté vody v samostatné nádobě určené pouze pro čištění dětského nádobí.
 - Umístěte části na čistou utěrku k vyschnutí na místo chráněné před nečistotami a prachem. Nepoužívejte utěrku k otírání nebo osušování předmětů. Částečně vyschlé části mohou ovlivnit provoz odsávačky nebo způsobit zhoršení stavu součástí.
 - Jakmile jsou části suché, můžete je uložit do čisté plastové nádoby s víkem nebo do čistého plastového sáčku na zip. Neukládejte části do nádoby či sáčku, dokud nejsou zcela suché.
- Po každém použití vyčistěte nádobu a kartáček na dudlíky podle doporučení výrobce pro čištění. Důkladně je opláchněte a nechte je po každém použití uschnout na vzduchu

Poznámka: Při demontáži a čištění ventilu buďte opatrní a NEVKLÁDEJTE do ventilu žádné předměty. Pokud je ventil poškozen, odsávačka mléka nebude správně fungovat.


Ukončení odsávání a přenos mateřského mléka

Po dokončení odsávání opatrně odstraňte odsávačku od prsu. Držte odsávačku ve svislé poloze, poté odpojte motor odsávačky a držte části sbírající mléko, abyste mohli mléko nalít do nádoby na skladování.


1. Po dokončení odsávání stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste vypnuli odsávačku. Prsty přerušte podtlak mezi prsem a prsním košíkem a poté opatrně odstraňte odsávačku od prsu.

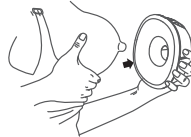

2. Odpojte motor odsávačky od sběrače mléka. Vyčistěte použité části podle návodu.

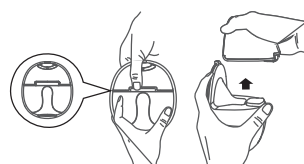

3. Chcete-li přelit mateřské mléko do lahvičky nebo sáčku na mléko, opatrně nalijte mateřské mléko do vybrané nádoby a ujistěte se, že otvor pro vylití je zarovnán s otvorem nádoby.

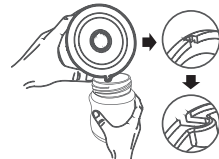

Uchovávání mateřského mléka

Konzultujte konkrétní pokyny pro uchovávání s poskytovatelem zdravotní péče nebo certifikovanou laktiční poradkyní. Při zmrazování skladujte v zadní části mrazničky a neukládejte mléko do dveří, protože teplota může kolísat při otevírání a zavírání dveří. Všechno mateřské mléko označte datem a použijte nejstarší mléko jako první.

Poznámka: NEZAMRAZUJTE mléko znovu, jakmile je rozmrazené.

Rozmrazování

Rozmrazujte zmrazené mléko v lednici nebo umístěte nádoby pod tekoucí studenou vodu a postupně vodu ohřívajte, dokud mléko nerozmrazíte. Rozmrazené mléko lze uchovávat v lednici až 24 hodin. Mateřské mléko není homogenizované a můžete si všimnout, že se při odstání odděluje. Před krmením dítěte jemně rozmíchejte rozmrazené mléko, abyste smíchali oddělené vrstvy. Mateřské mléko se může lišit barvou a konzistencí v závislosti na době dne, kdy bylo mléko odsáto, na tom, co jste jedli, a na věku dítěte v době odsávání.

Poznámka: NEROZMRAZUJTE MATEŘSKÉ MLÉKO V MIKROVLNCE! Mikrovlnné záření mění složení mléka. Mikrovlnné záření může také vytvořit v mléce "horká místa", která by mohla dítě popálit.

Poznámka: NEROZMRAZUJTE mateřské mléko v horké nebo vroucí vodě.

Technické údaje

1.Napájení

- Provoz na baterie: Dobíjecí Li-Ion baterie
- Doba provozu: Přibližně 100 minut, v závislosti na čerstvosti baterie a nastavení odsávačky
- Výkon odsávačky: Maximálně 4 Watty
- Regulace napětí: Lineární regulátor napětí s nízkým poklesem napětí a ochranou proti zkratu

2.Řídicí systém

- Řídicí jednotka: Mikroprocesor s integrovanou programovou pamětí
- Programová paměť: 8K flash paměť (ROM), 1K paměť (RAM)
- Rozhraní člověk-stroj: LED displej, softwarová tlačítka
- Volitelný režim odsávání: Lze vybrat 4 režimy odsávání, které se ovládají pomocí tlačítek
- Nastavitelná úroveň sání: Lze vybrat 9 úrovní sání, které se ovládají pomocí tlačítek
- Úroveň vakua sání (expresní režim): Minimálně 120 mmHg, maximálně 280 mmHg

Záruka

Naše záruka pokrývá jakékoli vady, které ovlivňují výkon mechanismu odsávačky po dobu 2 roků a ostatních součástí naší odsávačky mléka po dobu 90 dnů. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické vady, náhodné poškození, nesprávné použití, použití nesprávného napětí, běžné opotřebení, vady nebo poškození způsobené nesprávným použitím odsávačky a odsávačky, které byly upraveny nebo používány více osobami. V případě poruchy odsávačky mateřského mléka, na kterou se vztahuje naše záruka, opravíme nebo vyměníme odsávačku mléka nebo dotčené části. To může znamenat, že vám poskytneme jeden nebo více náhradních dílů. Můžeme vás požádat, abyste odsávačku a/nebo vadné komponenty vrátili k testování nebo opravě. Pokud chcete uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste nám oznámit chybu tím, že nás kontaktujete na našem webu www.lansinoh.cz. Spolu s odsávačkou je třeba poskytnout také doklad o koupi odsávačky mléka nebo jejích částí. Následně vás budeme informovat o dalším postupu. VAŠE ZÁKONNÁ PRAVA NEJSOU dotčena. Pro více informací o vašich právech nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho webu. Tuto záruku poskytuje Lansinoh Laboratories Inc, Ground Floor, West Mayesbrook House, Lawnswood Business Park, Leeds, LS16 6QY. Tento produkt je produktem osobní péče, a proto ho po otevření nelze vrátit. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s tímto produktem, zavolejte na naši zákaznickou linku na čísle +421917 901111.